


**Здоровье
зубов?
Я ГОТОВ!**

**Ирригатор
для полости рта
КТ-2924**

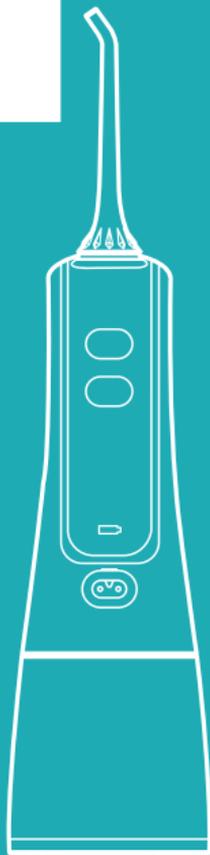

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание


Общие сведения	4
Комплектация	6
Устройство ирригатора	6
Подготовка к работе и использование	8
Чистка и обслуживание ирригатора	12
Уход и хранение	13
Устранение неполадок	14
Технические характеристики	16
Меры предосторожности	18

Общие сведения

Ирригатор — это прибор для ухода за полостью рта. Он очень прост в использовании: налейте воду (или специальный раствор для полоскания рта) в резервуар, выберите подходящий вам режим и начинайте очистку.

После еды остатки пищи застревают между зубами, забиваются в карманы десен. В таких случаях на помощь может прийти зубная нить или флоссер. Но для чистки зубов нитью необходимо обеспечить чистоту рук, а возможность помыть их имеется далеко не всегда. В противном случае повышается вероятность попадания в полость рта болезнетворных бактерий и вирусов. Также зубной нитью можно механически повредить десны.

Ирригатор может частично заменить зубную нить или флоссер. Тонкая и сильная струя воды вымывает остатки еды и налет из межзубного пространства и десневых карманов. Струя воды не только очищает труднодоступные места, но и тщательно массирует десны, что является хорошей профилактикой заболевания десен. Ирригатор считается самым гигиеничным вариантом ухода за полостью рта. Особенно он будет полезен для тех людей, которые носят брекететы, и людям с протезами или коронками.

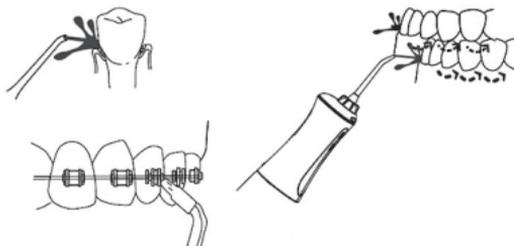

Модель Kitfort КТ-2924 является портативным ирригатором, которым можно пользоваться дома, брать с собой в путе-

шествия или на работу — он с легкостью поместится в небольшой сумке.

У ирригатора есть резервуар для воды емкостью 300 мл. Этого количества достаточно, чтобы обработать все труднодоступные участки во рту.

Моторный блок ирригатора имеет ребристую поверхность, чтобы устройство не скользило в руках.

Управление прибором осуществляется через моторный блок портативного ирригатора. На корпусе есть кнопка включения и кнопка выбора режима. У ирригатора 3 режима работы — «Стандарт», «Бережно», «Пульс». Если вы до этого не пользовались ирригатором, начните с режима «Бережно», т.к. неподготовленные и чувствительные десны могут начать кровоточить из-за сильного и тонкого потока воды. Когда десны привыкнут и окрепнут, вы можете переходить на режим «Стандарт», а затем на режим «Пульс».

Прибор автоматически отключается после 2 минут использования.

В комплекте к ирригатору идут 2 насадки.

Заряжать прибор с помощью USB-шнура можно от компьютера или через сетевой адаптер, который наверняка окажется у вас дома.

С профилактическими целями ирригатор нужен каждому взрослому человеку. Ирригатор не заменяет собой зубную щетку, он является частью комплексного ухода за полостью рта. Комплексный уход для вас должен подобрать ваш лечащий врач-стоматолог. Обычно уход включает в себя: ирригацию, чистку зубов зубной щеткой и ершиками, полоскание рта ополаскивателем и использование зубной нити, если это необходимо. Этот прибор рекомендуют стоматологи во всем мире.


Комплектация

1. Ирригатор — 1 шт.
2. Резервуар для воды — 1 шт.
3. USB-шнур — 1 шт.
4. Струйная насадка — 2 шт.
5. Чехол — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ирригатора



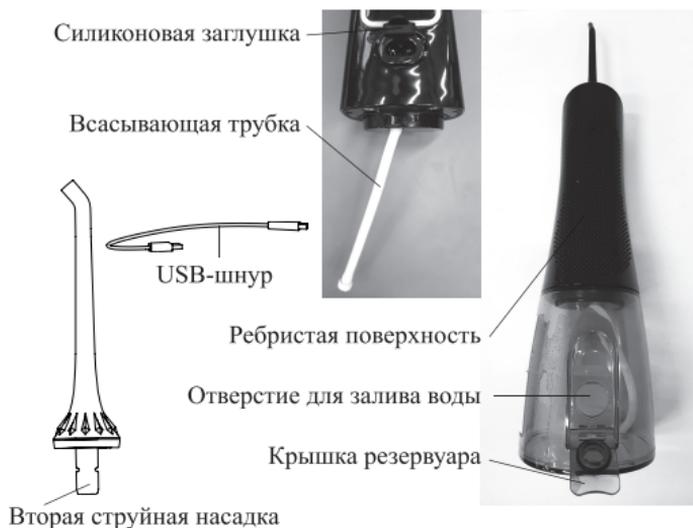

Ирригатор включается и выключается кнопкой включения/выключения. Далее кнопку будем называть просто «Вкл./Выкл».

Режимы выбираются кнопкой выбора режима.

Режимы работы

В режиме **«Стандарт»** точно направленная струя воды очищает межзубное пространство и другие труднодоступные места во рту.

В режиме **«Бережно»** струя не такая острая как в режиме «Стандарт». Если вы до этого не пользовались ирригатором, рекомендуется начинать им пользоваться, установив этот режим, так как неподготовленные и чувствительные десны могут начать кровоточить из-за сильного и резкого потока воды.

Режим **«Пульс»** предназначен для массажа десен и общей чистки полости рта пульсирующей струей воды. Массаж десен

усиливает микроциркуляцию крови, что является хорошей профилактикой пародонтита и пародонтоза.

При повторном включении ирригатор будет работать в режиме последнего использования.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием налейте воду в резервуар, установите струйную насадку в отверстие для насадки на моторном блоке до щелчка и включите прибор с водой, направляя насадку в раковину. Насадки помойте водой с мылом.

Зарядка ирригатора

1. Потяните силиконовую заглушку и откройте разъем для USB-шнура на моторном блоке.
2. Вставьте в разъем USB-шнур, другой конец шнура подключите в USB-разъем включенного электронного устройства, например, компьютера. Если у вас есть в наличии сетевой адаптер, то другой конец шнура вставьте в сетевой адаптер, а сам адаптер подключите в сеть.

Во время зарядки индикатор заряда будет медленно мигать синим светом. Когда устройство полностью зарядится, индикатор заряда будет мигать зеленым светом. При низком заряде аккумулятора индикатор заряда будет мигать красным светом. Если индикатор мигает в процессе работы, зарядите ирригатор.

Перед первым использованием заряжайте устройство в течение 4 часов. Если ирригатором не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием. Для увеличения срока службы батареи не оставляйте ирригатор разряженным на длительное время. Если вы оставите ирригатор разряженным, то батарея из-за саморазряда может разрядиться ниже минимального порога, и электрическая схема заблокирует батарею.

Установка насадки

Насадка является индивидуальным аксессуаром для каждого члена семьи.

Вставьте насадку в отверстие для насадки до щелчка. Отверстие расположено в верхней части моторного блока.

Чтобы извлечь насадку, нажмите на кнопку снятия насадки, а саму насадку потяните вверх.

Насадки имеют разноцветные кольца в нижней части. Это предусмотрено для того, чтобы было легче различить насадки между собой.


Примечание. Установка и снятие насадки в новом ирригаторе могут быть затруднительными.


Как налить воду в ирригатор

Используйте кипяченую воду или специальный раствор для полоскания рта. Температура воды или раствора должна быть не выше 45 °С.

Аккуратно откройте крышку резервуара для воды и налейте воду в резервуар. Не раскачивайте крышку из стороны в сторону, иначе крепления крышки могут сломаться.

Для удобства вы можете наливать воду в резервуар для воды, полностью отсоединив его от моторного блока. Для этого, удерживая одной рукой моторный блок, другой рукой поверните резервуар для воды против часовой стрелки так, чтобы отметка на резервуаре совпала со значком «» на моторном блоке. Отсоедините резервуар от моторного блока и налейте в него воду. Затем закрепите резервуар на моторном блоке: совместите выступы на моторном блоке с отверстиями на резервуаре и поверните резервуар по часовой стрелке так, чтобы отметка на резервуаре совпала со значком «» на моторном блоке.

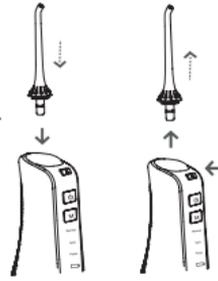

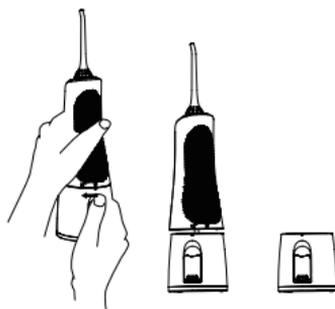


Выливать воду из ирригатора удобнее, отсоединив резервуар от моторного блока.

Использование

1. Поверните наконечник струйной насадки, чтобы отрегулировать направление потока воды. Установленная насадка крутится на 360°.
2. Перед тем, как включить ирригатор, наклоните его под углом 45° и направьте струйный наконечник себе в рот. Установите необходимый вам режим работы кнопкой выбора режима.

Примечание. Если вы пользуетесь ирригатором в первый раз, установите режим «Бережно», иначе чувствительные и неподготовленные десны могут быть травмированы резкой и сильной струей воды.

3. Наклонитесь над раковиной, слегка приоткройте рот, нажмите кнопку «Вкл/Выкл» и удерживайте ее несколько секунд. Вода из вашего рта должна стекать в раковину. Действуйте в такой последовательности, как на рисунке: двигайтесь от жевательных зубов к передним, направляйте насадку вдоль контура десны, задерживаясь в межзубных пространствах.

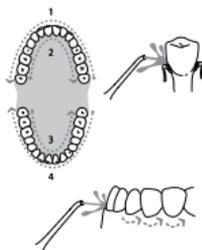

Чтобы разбрызгивания было меньше, включайте и выключайте ирригатор только при нахождении насадки во рту.

Примечание. Чтобы остатки воды полностью вылились из резервуара, поворачивайте ирригатор при чистке в разные стороны.

4. Когда вода закончится, выключите ирригатор, нажав кнопку «Вкл/Выкл». Наклоните ирригатор горизонтально, аккуратно откройте крышку резервуара. Переверните ирригатор и слейте оставшуюся воду. Если пользовались не водой, а специальным раствором для полоскания, обязательно промойте ирригатор после него. Для этого налейте в резервуар воду, включите ирригатор, направляя сам прибор и насадку вниз в раковину.

Примечание. Ирригатор автоматически отключается после 2 минут использования.

5. Отсоедините резервуар, если вы планируете долгое время не пользоваться устройством. Для этого, удерживая одной рукой моторный блок, другой рукой поверните резервуар для воды против часовой стрелки так, чтобы отметка на резервуаре совпала со значком «» на моторном блоке. Снимите резервуар, откройте крышку, вытащите насадку, нажав на кнопку снятия насадки, просушите все части прибора и уберите их на хранение.

Примечание. Крышку отверстия для залива воды лучше открывать после каждого использования для того, чтобы остатки воды испарились. Или вы можете отсоединить резервуар от моторного блока, повернув резервуар в сторону открытого замка. Если не открывать крышку и не отсоединять резервуар от моторного блока, остатки воды, раствора в резервуаре могут «задохнуться» и при последующем использовании давать неприятный запах застоявшейся воды.

Советы по использованию

Если вы пользуетесь ирригатором в первый раз, установите режим «Бережно», иначе чувствительные десны могут быть

травмированы резким потоком воды. Со временем десны привыкнут к новым ощущениям, и можно будет попробовать установить другие режимы.

У ирригатора есть функция памяти. После нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» будет включен тот режим, который вы установили при предыдущем включении.

Вы можете переключать режимы независимо от того, работает ирригатор или выключен.

В первое время использования возможна небольшая кровоточивость десен. Если у вас наблюдается сильная кровоточивость десен после двух недель использования ирригатора, обратитесь к врачу и проконсультируйтесь с ним по этому поводу.

Снимайте резервуар портативного ирригатора с моторного блока. Если резервуар не отсоединять от моторного блока и не пользоваться при этом ирригатором несколько дней, то остатки воды, раствора в резервуаре могут «задохнуться» и при последующем использовании давать неприятный запах застоявшейся воды.

Рекомендуемая температура воды или раствора должна быть не выше 45 °С. Ориентируйтесь на свои ощущения: со временем вы поймете, воду какой температуры использовать комфортнее всего.

Чистка и обслуживание ирригатора

Перед чисткой прибора отключите его от сети. Не погружайте моторный блок в воду.

Протирайте моторный блок прибора сухой, а затем влажной тканью.

Периодически промывайте насадки водой с мылом. Меняйте насадки по мере износа.

Если прибор не использовался в течение долгого времени, промойте его. Для этого налейте в резервуары воду, включите ирригатор, направляя насадку в раковину.

Если вместо кипяченой воды использовать специальные жидкости для полоскания рта, то с течением времени это может привести к образованию осадка в резервуаре и на внутренних поверхностях. Чтобы этого избежать промывайте устройство сразу же после использования таких растворов.

Как избавиться от известкового налета

Внутри ирригатора по истечении некоторого времени начинают скапливаться известковый налет и прочие отложения. Это зависит от жесткости воды. Налет накапливается как в резервуаре для воды, так и на внутренних поверхностях. Это затрудняет работу мотора и снижает срок службы прибора. Известковый налет также является благоприятной средой для размножения болезнетворных бактерий и организмов. Средство для чистки ирригатора поможет удалить налет со всех поверхностей и скрытых элементов устройства. Действуйте согласно инструкции на таком средстве. Это поможет устройству дольше работать без поломок.

Если у вас нет средства для чистки ирригатора, вы можете воспользоваться лимонной кислотой из расчета 3 г на 100 мл воды. Залейте около 200 мл воды с растворенной в ней лимонной кислотой в резервуар ирригатора и оставьте на 20–25 минут. Вы можете положить насадки в резервуар с раствором. Затем присоедините резервуар к моторному блоку, включите ирригатор и прогоните оставшуюся жидкость в резервуаре. После этого дважды налейте чистой воды в резервуар и смойте остаток лимонной кислоты, направляя держатель с насадкой в раковину.

Уход и хранение

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не давайте детям без присмотра пользоваться устройством.

Аккумулятор ирригатора литиевый, поэтому при длительном хранении ирригатор лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем полностью разрядить аккумулятор и заряжать его примерно 2 часа. Таким образом, ирригатор будет заряжен примерно наполовину. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 8–12 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Если вы не пользуетесь прибором в течение длительного времени, помойте и высушите все части прибора. Проверните резервуар и слейте воду. Уберите ирригатор на хранение в коробку.

Устранение неполадок

Ирригатор не включается, индикации нет

Возможная причина	Решение
Аккумулятор ирригатора разряжен	Зарядите аккумулятор

Ирригатор не заряжается, индикации нет

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Ирригатор не подает воду

Возможная причина	Решение
В резервуаре нет воды	Налейте в резервуар воду

Из места соединения насадки льется вода

Возможная причина	Решение
Уплотнительное кольцо струйной насадки повредилось или потерялось, между насадкой и моторным блоком образовался зазор	Обратитесь к производителю за новой насадкой
Насадка не до конца вставлена в отверстие для насадки	Вставьте насадку в отверстие для насадки до упора. Отверстие расположено в верхней части моторного блока. Установка и снятие насадки в новом ирригаторе может быть затруднительным
Насадка сломалась	Замените насадку

Недостаточное давление

Возможная причина	Решение
Фильтр всасывающей трубки засорился	Аккуратно очистите фильтр всасывающей трубки, не повредив его 
В отверстии струйной насадки накопились отложения солей	Очистите струйную насадку, следуя рекомендациям в разделе «Чистка и обслуживание ирригатора»

Ирригатор отключился во время работы

Возможная причина	Решение
Прошло 2 минуты, и ирригатор автоматически отключился	Ирригатор автоматически отключается через 2 минуты. Если вы еще не закончили чистку, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» и продолжайте чистку

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1400 мА*ч (5,18 Вт*ч)
2. Мощность: 5 Вт
3. Питание: 5 В, 1 А
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Частота пульсации струи: 1200–1800 имп/мин
6. Давление воды: от 2 до 7 бар (в зависимости от выбранного режима)
7. Емкость резервуара для воды: 300 мл
8. Уровень шума: ≤ 75 дБ
9. Время зарядки: 4 ч
10. Режимов работы: 3
11. Автоотключение: через 2 мин
12. Время работы ирригатора: 28 мин (в режиме «Бережно»)
13. Длина USB-шнура: 0,7 м

14. Размер устройства: 71 × 81 × 340 мм
15. Размер упаковки: 113 × 75 × 238 мм
16. Вес нетто: 0,25 кг
17. Вес брутто: 0,45 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Флайкэт Илектрикэл Ко., Лтд.
Блдг 28, Рм. 101-401 Энд Блдг 30, Рм. 101, 301 Энд 401, Лун-
ванмяо Индастриэл Парк, Байшися Ист Кэмыюнити, Фуюн
Таун, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург,
Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на
территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург,
Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30
до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора
горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вре-
да окружающей среде необходимо отделить данный объект
от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопас-
ным способом, например, сдать в специальные места по ути-
лизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упа-
ковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в ди-
зайн, комплектацию, а также в технические характеристики из-
делия в ходе совершенствования своей продукции без допол-
нительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение патрубков, клапана или резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать кипяченую воду или регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Людям, которые недавно перенесли периодонтальную или стоматологическую хирургическую операцию, а также тем, кто проходит курс лечения, связанный с проблемами в ротовой полости, перед применением ирригатора необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
2. Если у вас наблюдается сильная кровоточивость десен после двух недель использования ирригатора, обратитесь к врачу и проконсультируйтесь с ним по этому поводу.
3. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
4. Используйте ирригатор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
5. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

6. Не переносите прибор, взявшись за USB-шнур. Не тяните за USB-шнур при отключении вилки от розетки.
7. Не используйте устройство, если USB-шнур, или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором, ирригатор не игрушка.
9. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Обязательно выливайте всю оставшуюся воду после использования.
11. Температура воды или раствора должна быть не выше 45 °С.
12. Не допускайте падения ирригатора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении USB-шнура его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87