

ZY8300

Аппарат для ухода
за кожей лица



ReadySkin

Руководство
по эксплуатации

Оглавление

Введение	4
Противопоказания и ограничения к использованию	5
Общие замечания	7
Меры безопасности	8
Внешний вид и управление аппаратом	12
Режимы аппарата	14
Подготовка аппарата к работе	15
Перед применением	17
Проведение процедур	18
Неполадки и их устранение	31
Чистка и обслуживание аппарата	35
Технические характеристики	36
Комплектация	38
Правила хранения и реализации	39
Правила транспортировки	39
Сертификация и гарантия	40
Утилизация продукта	41

*Внимание!
Бытовой
аппарат
ReadySkin ZY8300
не является
медицинским
оборудованием.
Не предназначен
для применения
в медицинских
целях.*

Введение

Благодарим Вас за покупку аппарата для ухода за кожей лица ReadySkin ZY8300! Этот многофункциональный аппарат с программами предназначен для ухода за кожей лица.

Аппарат ReadySkin ZY8300 позволяет осуществлять комплексный уход за кожей на основе современных эффективных методик с использованием ультразвука и термомассажа, не подвергая кожу сдавливанию, растяжению и механическому повреждению верхних слоев.

Принцип действия аппарата основан на генерации ультразвукового сигнала частотой 30 кГц, вызывающего невидимые глазом колебания рабочего инструмента аппарата — металлической лопаточки.

Противопоказания и ограничения к использованию

Запрещено использование аппарата при следующих условиях:

- Беременность и лактация.
- Острые инфекционные и вирусные заболевания.
- Онкологические заболевания.
- Наличие кардиостимулятора.
- Заболевания кожи и соединительной ткани (напр. склеродермия, красная волчанка).
- Психические заболевания.
- Хронические дерматиты и дерматозы в стадии обострения.
- Акне в стадии обострения.
- Наличие купероза в предполагаемой зоне воздействия аппарата.
- Склонность к образованию келоидов.
- Наличие силиконовых имплантатов, золотых нитей, металлических имплантатов в области обработки.

6

- Тяжелые формы сахарного диабета.
- Тяжелые стадии гипертонической болезни, нарушения сердечного ритма.
- Детский или подростковый возраст.
- Прием дерматропных препаратов (например, роаккутан).
- Грипп, ОРВИ, повышенная температура тела.
- При посещении солярия или в период активного солнечного загара.

Во время процедуры следует избегать таких областей тела, как:

- глаза;
- области над сердцем и щитовидной железой;
- области половых органов;
- области над силиконовыми имплантатами, области с гелевой контурной пластикой.

Общие замечания

- Аппарат собран из гипоаллергенных материалов.
- Основной курс процедур: 1 — 2 раза в неделю, курсом по 10 — 20 процедур.
- Поддерживающий курс: 1 раз в месяц.
- Курсы процедур проводят 1 — 2 раза в год. Между курсами желательно проведение поддерживающих процедур один раз в месяц.
- Количество прохождений по одному участку кожи в течение сеанса не должно превышать 3-х раз.

Меры безопасности

Аппарат ReadySkin ZY8300 достаточно прост в использовании, однако, необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации и соблюдать изложенные в нем требования по работе с аппаратом.

Внимание

- Аппарат рассчитан на питание от встроенного аккумулятора. Для зарядки используйте идущий в комплекте USB кабель.
- Возможно использование адаптера питания. Перед подключением кабеля к сети убедитесь, что кабель не имеет видимых повреждений изоляции.
- Проводите регулярную проверку состояния металлических аппликаторов аппарата. При обнаружении острых кромок или глубоких царапин на рабочей поверхности аппликаторов дальнейшая эксплуатация аппарата запрещается до устранения дефектов при помощи полировки.
- Запрещается эксплуатация и хранение аппарата в местах с повышенной влажно-

стью (саунах, ваннных комнатах) и высокой температурой, под прямыми солнечными лучами.

- После внесения аппарата в теплое помещение с холода необходимо подождать не менее 2-х часов перед подключением аппарата к сети и началом использования.
- Во время проведения процедуры с использованием ReadySkin ZY8300 запрещается касаться или быть подключенным к другому электрооборудованию или заземлению.
- Запрещается работать аппликаторами аппарата по сухой коже. Поддерживайте поверхность кожи постоянно увлажненной при помощи специальных средств (тоники, сыворотки, лосьонов или гелей) или чистой воды.
- Во время процедуры не рекомендуется многократная (от 8 раз) обработка аппликаторами одного и того же участка кожи.
- Выключайте питание аппарата во время перерывов в работе, если их продолжительность превышает 30 сек.
- Не допускайте попадания воды или косметических средств внутрь аппарата,

регулярно удаляйте влагу с металлических поверхностей аппликаторов. Категорически запрещается погружать аппарат в жидкость.


- После использования аппарата в течение 20 минут необходимо сделать перерыв не менее чем на 30 минут, чтобы дать аппарату остыть.
- Не оставляйте включенный аппарат без присмотра.
- Перед и после проведения процедуры очищайте рабочую поверхность аппликаторов дезинфицирующим раствором (70% раствор спирта, хлоргексидин, перекись водорода).
- Не нажимайте на кнопку управления аппаратом острыми предметами или кончиками ногтей.
- Храните аппарат вдали от нагревательных приборов и в защищенном от солнечных лучей месте.
- Храните аппарат в недоступном для детей месте.
- Не используйте аппарат в помещениях с высокой влажностью и температурой.

- Использование аппарата допускается только лицами от 18 лет. Людям с ограниченными физическими и умственными возможностями перед использованием аппарата необходимо внимательно ознакомиться с устройством и возможными рисками.
- Не рекомендуется разбирать или самостоятельно ремонтировать устройство.
- Сервисное обслуживание аппарата должно производиться только в специализированных центрах.
- Полностью зарядите устройство перед первым использованием.
- В случае необходимости ремонта обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

Внимание

Фирма-производитель и торгующая организация не несут никакой ответственности за последствия применения аппарата, вызванные нарушением текущих правил эксплуатации или несоблюдением методик проведения процедур.

Внешний вид и управление аппаратом

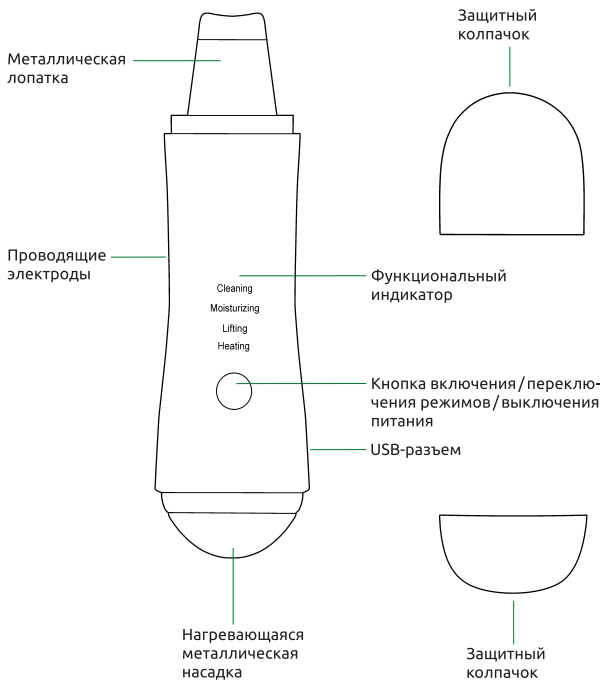

- Управление аппаратом осуществляется посредством главной кнопки.
- С одной стороны установлена металлическая лопатка, а с другой — нагревающая металлическая насадка.
- Аппарат включается при длительном нажатии (2 сек.) на кнопку управления, выбранный режим подсвечивается синим цветом.
- По умолчанию при включении аппарата включается режим «Cleaning» (ультразвуковое очищение), также об этом сигнализирует подсветка индикатора.
- Для переключения режима нажмите главную кнопку. Для выключения аппарата нажмите и удерживайте кнопку управления (2 сек.).

Режимы работы аппарата

1. «Cleaning» — режим для очищения кожи лица.
2. «Moisturizing» — режим для питания и увлажнения кожи лица.
3. «Lifting» — режим для омоложения и повышения упругости кожи лица.
4. «Heating» — режим нагрева для термо-массажа и расслабления тканей лица.

Подготовка аппарата к работе

Подготовка

Проведите визуальный осмотр аппарата на предмет отсутствия механических повреждений. Убедитесь, что аппликаторы не имеют повреждений и острых сколов.

Зарядка аппарата

От компьютера

Включите компьютер и затем подключите аппарат при помощи micro USB кабеля. Световые индикаторы режимов станут одновременно и плавно мигать синим светом. Остановите зарядку, когда индикаторы перестанут мигать и будут гореть непрерывно.

От розетки

Подсоедините аппарат с помощью кабеля к адаптеру питания, затем подсоедините адаптер в розетку.

Когда аккумулятор аппарата полностью заряжен, то индикатор зарядки горит непрерывно синим цветом.

Внимание

- 1. Если устройство не включается после длительного нажатия кнопки питания, то зарядите его.*
- 2. Если аппарат не эксплуатировался в течение 90 дней, пожалуйста, зарядите его.*
- 3. Полного заряда аккумулятора хватает на 60 — 120 минут работы. Аппарат автоматически выключится через 10 минут работы.*

Рекомендуемые производителем параметры адаптера питания:

Выходной ток	1 A
Разъем выходной	USB, тип A
Входное напряжение	AC 220 В
Выходное напряжение	DC 5 В

Примечание

Прибор не предназначен для использования во время зарядки.

Перед применением

*Внимание!
Бытовой аппарат
ReadySkin
ZY8300
не является
медицинским
оборудованием
и предназначен
для ухода
за кожей в
домашних
условиях.*

Перед применением внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации. Для обеспечения своей безопасности перед использованием внимательно прочтите главу «Меры безопасности».

Перед проведением процедур рекомендуется предварительная консультация врача-дерматолога.

Проведение процедур

Перед проведением процедуры очистите кожу от макияжа и внешних загрязнений.

Во время проведения процедур кожа лица не должна быть сухой, используйте специальные средства.

В процессе обработки кожи вы можете чувствовать легкое покалывание, легкий дискомфорт.

Немедленно остановите процедуру, если почувствуете боль, незамедлительно обратитесь к врачу.

Для достижения или поддержания лучшей эффективности косметического ухода аппарат следует использовать в течение длительного периода времени в соответствии с рекомендациями, изложенными в данном руководстве.

Во время работы наблюдайте за ощущениями и состоянием кожи. При появлении дискомфорта следует прекратить работу.

Пользоваться аппаратом для ультразву-

ковой чистки лица ReadySkin ZY8300 очень просто.



Для того, чтобы посмотреть видео-инструкцию, возьмите мобильный телефон с камерой:

- 1. Запустите программу для сканирования кода или наведите объектив камеры на код.*
- 2. Приятного просмотра!*

Для Вашего удобства мы сняли подробную видео-инструкцию о том, как применять аппарат для различных процедур по уходу за кожей лица дома.

Чтобы посмотреть видео-ролик, воспользуйтесь Вашим смартфоном — отсканируйте QR-код.

Во время процедур рекомендуем двигаться металлической лопаткой /нагревающейся насадкой по массажным линиям лица, как показано на рисунке справа.



Ультразвуковая чистка (пилинг)

Принцип действия

Процедура мягкого щадящего очищения кожи лица.



За счет ультразвуковых волн, проникающих в верхние слои кожи, происходит отшелушивание ороговевших клеток эпидермиса, удаление поверхностных загрязнений и скоплений кожного сала. Ультразвуковая обработка способствует очищению, легкому массажу, стимуляции процессов кислородно-восстановительного обмена и регенерации в клетках.

Режим аппарата: «Cleaning»

Дополнительные средства для проведения процедуры, которые следует наносить на кожу лица

- гель для ультразвуковых процедур / термальная вода / очищенная вода.

Этапы проведения процедуры

1. Тщательно очистите кожу лица.
2. Нанесите на лицо гель для ультразвуковых процедур / термальную воду / очищенную воду.
3. Снимите защитный колпачок. Обработайте лопатку антисептическим средством.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2-ух секунд. По умолчанию включится режим ультразвуковой чистки «Cleaning».



Лопатка
смотрит
вверх. Лезвие
обращено
внутрь.

5. Расположите металлическую лопатку аппарата под углом в 45° , как показано на рисунке.
6. Проводите лопаткой по массажным линиям лица. Удаляйте излишки геля и загрязнений с лопатки ватным диском.
7. Смойте остатки средства с лица теплой чистой водой.

Интенсивность ощущений зависит от чувствительности кожи. После проведения процедуры допустимо легкое покраснение кожи.

Возможные ощущения во время процедуры

Допустимо легкое покалывание и вибрация.

Ионное очищение

Принцип действия

Процедура глубокого очищения кожи лица.



Метод основан на действии химической реакции, для запуска которой необходимо нанести на кожу специальные ионизированные гели-дезинкрустанты, которые проводят электрические импульсы.

Под действием гальванического тока и специальных гелей на коже образуются ионы щелочей и кислот, которые проникают в слои кожи, вступают в реакцию с кожным салом, шлаками, токсинами и другими загрязнениями, образуя мыло. Таким образом комедоны (черные точки) растворяются и легко выводятся из кожи. Происходит отшелушивание ороговевших клеток и обновление кожных покровов.

Режим аппарата: «Cleaning»

Дополнительные средства для проведения процедуры, которые следует наносить на кожу лица

- гель для дезинкрустации.

Этапы проведения процедуры

1. Тщательно очистите кожу лица.
2. Нанесите на лицо гель для дезинкрустации.
3. Снимите защитный колпачок. Обработайте лопатку антисептическим средством.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2-ух секунд. По умолчанию включится режим ультразвуковой чистки «Cleaning».
5. Возьмите в руку аппарат таким образом, чтобы пальцами руки зажать боковые электроды.



Лопатка
смотрит
вверх. Лезвие
обращено
внутрь.

6. Расположите металлическую лопатку аппарата под углом в 45°, как показано на рисунке.

7. Проводите лопаткой по массажным линиям лица. Удаляйте излишки геля и загрязнений с лопатки ватным диском.
8. Смойте остатки средства с лица теплой чистой водой.

Интенсивность ощущений зависит от чувствительности кожи. После проведения процедуры допустимо легкое покраснение кожи.

Возможные ощущения во время процедуры

Допустимо легкое покалывание и вибрация.

Ионофорез

Принцип действия

Процедура глубокого питания и увлажнения кожи.



Процедура основана на проведении маломощного гальванического тока, который воздействует на верхние и средние слои дермы. Благодаря импульсу тока активные компоненты уходовых средств могут достигать более глубоких слоев дермы, повышая эффективность.

За счет такого воздействия косметические препараты лучше усваиваются, обеспечивая стойкое антивозрастное, увлажняющее и питательное действие.

Режим аппарата: «Moisturizing»

Дополнительные средства для проведения процедуры, которые следует наносить на кожу лица


- косметические средства для ухода за

кожей лица;

- гель для ультразвуковых процедур.

Этапы проведения процедуры

1. Тщательно очистите кожу лица.
2. Нанесите косметическое средство для ухода за кожей лица, а поверх него — гель для ультразвуковых процедур.
3. Снимите защитный колпачок. Обработайте лопатку антисептическим средством.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2-ух секунд. По умолчанию включится режим «Cleaning». Переключите аппарат в режим «Moisturizing».
5. Возьмите в руку аппарат таким образом, что-бы пальцами руки зажать боковые электроды.
6. Расположите металлическую лопатку аппарата плоской стороной к коже, как показано на рисунке.

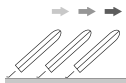

Лопатка
обращена
внутри. Лезвие
направлено
вверх.

7. Проводите лопаткой по массажным линиям лица. Удаляйте излишки геля и косметических средств с лопатки ватным диском.
8. Смойте остатки геля теплой водой.

Интенсивность ощущений зависит от чувствительности кожи. После проведения процедуры допустимо легкое покраснение кожи.

Возможные ощущения во время процедуры

Допустимо легкое покалывание и вибрация.

Ультразвуковой микромассаж с эффектом лифтинга

Принцип действия

Во время работы аппарат оказывает ионизирующий эффект (ион «+»). Ток поступает в клеточные ткани, оказывает стимуляцию высокочастотной вибрацией.



В ходе процедуры запускается регенерация, стимулируется выработка эластина и коллагена. Ультразвуковой микромассаж обеспечивает проникновение в глубокие слои кожи косметических средств для их лучшего воздействия.


Режим аппарата: «Lifting»

Дополнительные средства для проведения процедуры, которые следует наносить на кожу лица

- косметические средства для ухода за кожей лица;
- гель для ультразвуковых процедур.

Этапы проведения процедуры

1. Тщательно очистите кожу лица.
2. Нанесите косметическое средство для ухода за кожей лица, а поверх него — гель для ультразвуковых процедур.
3. Снимите защитный колпачок. Обработайте лопатку антисептическим средством.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2-ух секунд. По умолчанию включится режим «Cleaning». Переключите аппарат в режим «Lifting».
5. Возьмите в руку аппарат таким образом, чтобы пальцами руки зажать боковые электроды.

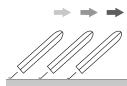

Лопатка
обращена
внутрь. Лезвие
направлено
вверх.

6. Расположите металлическую лопатку аппарата плоской стороной к коже, как показано на рисунке.
7. Проводите лопаткой по массажным линиям лица. Удаляйте излишки средства с лопатки ватным диском.
8. Смойте остатки геля теплой водой.

После проведения процедуры рекомендуется нанести увлажняющую маску с гиалуроновой кислотой.

Интенсивность ощущений зависит от чувствительности Вашей кожи.

Возможные ощущения во время процедуры

Легкая вибрация.

Термомассаж

Принцип действия

Термомассаж проводится с помощью нагревающейся металлической насадки аппарата. Согревающий массаж расслабляет мышцы лица, усиливает кровообращение в тканях и улучшает усвоение косметических средств.



Также данная процедура может быть проведена в качестве подготовки перед проведением ультразвуковой чистки/дезинкрустации с целью расширения пор.

Режим аппарата: «Heating»

Дополнительные средства для проведения процедуры, которые следует наносить на кожу лица

- Нет необходимости (при желании можно нанести на кожу уходовый крем по типу кожи).

Этапы проведения процедуры

1. Тщательно очистите кожу лица.
2. Снимите защитный колпачок с нагревающейся металлической насадки. Обработайте массажную насадку антисептическим средством.
3. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2-ух секунд. По умолчанию включится режим «Cleaning». Переключите аппарат в режим «Heating».
4. Включится режим нагрева первого уровня — 39°. Для переключения в режим нагрева до 42° нажмите кнопку управления еще раз. Индикатор начнет мигать.
5. Выберите необходимый уровень нагрева (см. рекомендации, описанные далее). Проводите нагревающейся насадкой по массажным линиям лица.
6. Смойте остатки средства с лица теплой чистой водой.
7. По завершению процедуры дайте остыть металлической насадке перед

надеванием на нее защитного колпачка.

8. После проведения процедуры рекомендуется нанести косметические средства для ухода за кожей лица, в случае, если далее не планируется проведение чистки кожи лица.

Рекомендации по выбору уровня нагрева в режиме «Heating».

1. Нагрев до 39° — данный режим помогает открыть поры перед проведением чистки кожи, а также улучшает поглощение кожей косметических средств.
2. Нагрев до 42° — согревающий массаж для ушей и шеи. В ходе массажа открываются лимфатические каналы, расслабляются микрососуды, улучшается циркуляция крови и обновляются клетки кожи.

Интенсивность ощущений зависит от чувствительности Вашей кожи.

Возможные ощущения во время процедуры

Прогрев обрабатываемых участков кожи, не вызывающий дискомфорта. Допустимо небольшое покраснение кожи.

Возможные неполадки и способы их устранения

Если неисправность не удается решить самостоятельно, необходимо обратиться к продавцу изделия или на горячую линию импортера

*по телефону
8 800 755-56-29*

*или e-mail
garotdel@
mail.ru*

Неисправность

Аппарат не заряжается

Решение

Убедитесь, что аппарат подключен кабелем micro USB к источнику питания. Проверьте имеется ли локальное сетевое напряжение. Если индикатор зарядки все еще не загорается, обратитесь в сервисный отдел.

Аппарат не работает

Убедитесь, что вы нажали и удерживали кнопку включения 2 сек. Зарядите устройство в соответствии с руководством по эксплуатации. Проверьте на наличие сбоя в питании. Проверьте, загорается ли индикатор во время зарядки аппарата. Если индикатор не загорается и устройство по-прежнему не работает — обратитесь в сервисный отдел.

Аппарат (корпус) нагревается во время использования

Это не является неисправностью, потому что во время работы аппарата осуществляется выработка тепла.



*Внимание!
Антисептическое средство не должно попадать внутрь пластикового корпуса аппарата. Используйте салфетки с умеренным количеством жидкости.*

Чистка и обслуживание аппарата

Перед началом и по окончании каждой процедуры необходимо проводить антисептическую обработку металлических аппликаторов аппарата при помощи мягкой салфетки, смоченной в антисептическом растворе (70% раствор спирта, хлоргексидин, перекись водорода). Периодически протирайте корпус аппарата мягкой салфеткой, слегка увлажненной нейтральным моющим средством.


Запрещается

- Погружать аппарат в жидкость.
- Использовать для протирки аппликаторов и корпуса агрессивные средства и растворители.
- Применять салфетки с жестким ворсом или абразивным слоем.
- Подвергать аппарат сильному механическому воздействию.
- Внутри аппарата ReadySkin ZY8300 нет компонентов или частей, требующих обслуживания.


Технические характеристики

Модель	ZY8300
Частота ультразвука	30 кГц
Выходная мощность ультразвуковых колебаний	1,2 Вт/см ²
Выходное напряжение адаптера	5 В
Емкость аккумулятора	800 мАч
Входное напряжение адаптера	220 В
Сила тока адаптера	1 А
Время полной зарядки	3 ч.
Размеры аппарата	193х51, 9х26,11 мм
Масса нетто	235 г

Комплектация

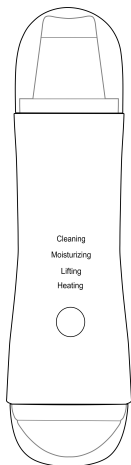


Аппарат ReadySkin
ZY8300

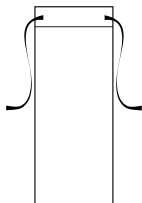

Чехол



Руководство
по эксплуатации

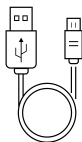

Micro USB
кабель



Сетевое зарядное
устройство

Правила хранения и реализации

Изделие должно храниться в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40 ° и относительной влажности воздуха до 80 % в соответствии с ГОСТ В9.003 и ГОСТ 21552.

В помещениях, где хранятся изделия не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию. Реализация осуществляется в соответствии с договорами на поставку.

Правила транспортировки

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТ В 9.001 и ГОСТ 21552 автомобильным, железнодорожным и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков.

Транспортировка по железной дороге должна осуществляться в крытых вагонах, а при перевозке в открытых вагонах — в контейнерах.

Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать

перемещения во время транспортировки.

Сертификация и гарантия

Readyskin ZY8300 соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 020 / 2011, ТР ТС 004 / 2011, ТР ЕАЭС 037 / 2016.

Гарантийный период на изделие Readyskin ZY8300 составляет 12 месяцев с даты получения товара.

Гарантия действует при условии соблюдения следующих условий:

- не нарушены правила и условия эксплуатации, изложенные в документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
- отсутствуют механические повреждения, следы неквалифицированного ремонта, изменении конструкции или схемы изделия, возникших после передачи товара потребителю;
- отсутствуют повреждения или неисправности, вызванные пожаром, молнией или другими природными явлениями, умышленными или неосторожными действиями, небрежным обращением, воздействием высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и пр.

- наличия целостной маркировки с серийным номером и моделью изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (например, аккумуляторы), детали отделки и корпуса, аксессуары и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования, а также на документацию, прилагаемую к изделию.

Надлежащая утилизация продукта



Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт был приобретен, или местным органом власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный аппарат для экологически безопасной переработки.

Промышленным потребителям следует связаться с поставщиком и проверить сроки и условия контракта на закупку. Данный продукт не следует утилизировать совместно с другими коммерческими отходами.

43

Производитель

«Shenzhen Boyuan Intelligent Electronic Technology Co., Ltd».

Сделано в КНР

Адрес завода-изготовителя

Room 203, building Y2, bantian creative park, yayuan road,
bantian street, longgang district, Shenzhen city, Guangdong
province, Китай

Импортер

ООО «Р-Дистрибуция», Адрес: Россия, 195267, г.

Санкт-Петербург, Просвещения пр-кт, дом № 86, корпус
1, офис 12-Н

Горячая линия

8 800 775-56-29 звонок по России бесплатный

Дата производства

1 кв. 2023 г.





ReadySkin



readyskin.su

EAC